

# Okped® orione



**Fig.1:** La parte arrotondata deve essere posizionata attorno alla deformità


**Fig.1:** Apply felt with the round shape around the affected part




**Fig.2:** Il feltro non deve coprire la deformità

**Fig.2:** Felt do not must cover the deformity

SINISTRO / LEFT

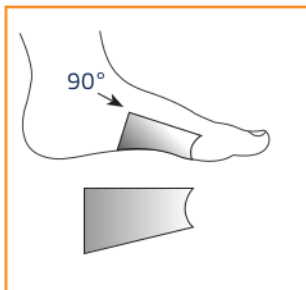

DESTRO / RIGHT

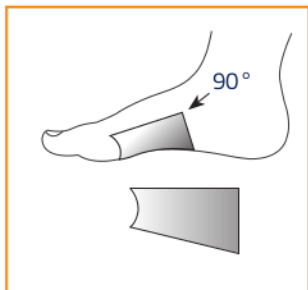

SAFTE S.p.A.  
CERTIFIED  
ISO 9001  
Quality System

CE

SAFTE

SAFTE S.p.A. - Via Adamello 13 - 10093 Collegno (TO) Italy  
Tel. +39 011.4038111 Fax +39 011.4038126  
e-mail: info@safte.it www.safte-italia.com www.safte.it

# Okped® orione

FELTRO ADESIVO PER ALLUCE VALGO

ADHESIVE FELT PAD FOR HALLUX VALGUS



GRAZIE AL PARTICOLARE DISEGNO BREVETTATO, IL FELTRO IPOALLERGENICO TOGLIE LA PRESSIONE DELLA SCARPA SULLA PARTE DOLORANTE DELL'ALLUCE VALGO DONA IMMEDIATO SOLLIEVO AIUTANDO A RIDURRE DRASTICAMENTE IL DOLORE

ADHESIVE FELT PAD FOR HALLUX VALGUS  
THANKS TO THE PATENTED DESIGN, THE FELT CREATES A FREE AREA THAT REDUCES PRESSURE AND FRICTION OF THE SHOE AROUND PAINFUL AREA. EASY AND FAST APPLICATION

## FELTRO ADESIVO PER ALLUCE VALGO

### CHE COSA È L'ALLUCE VALGO

È una deformazione del primo dito del piede che prende una deviazione verso le altre dita assumendo una sporgenza mediale del primo osso del metatarso.

Questa deformazione ossea causa dolore perché insorge una protuberanza, la cosiddetta "cipolla", che indica un'inflammatione che tende a peggiorare con lo sfregamento sulla parte interna della scarpa.

### CAUSE

Chiunque può essere affetto da alluce valgo.

E' una patologia che aumenta con l'avanzare dell'età o può essere dovuta a fattori ereditari.

### EFFETTI

Coloro che soffrono di alluce valgo molto spesso hanno difficoltà a camminare per il dolore causato dallo sfregamento della parte infiammata della protuberanza, sulla scarpa.

### SOLUZIONE

Il feltro OK Ped, grazie al particolare disegno ed al materiale impiegato, è un efficace rimedio per alleviare il dolore causato dalla pressione e frizione che la calzatura effettua sulla parte dolorante dell'alluce valgo.

Una volta applicato correttamente, il feltro crea un'area libera attorno alla parte dolorante, dando un immediato sollievo e facendo riscoprire il piacere di camminare.

Adatto a tutti i tipi di calzature eccetto quelle con profondo décollete o tipo ballerine.

Disponibile in versione destra e sinistra

### TAGLIE / SIZE

S	L
35-40	41-45

DESTRO / SINISTRO - RIGHT / LEFT

CONFEZIONE 4 PEZZI DELLA STESSA TAGLIA / 4 PCS SAME SIZE

## ADHESIVE FELT PAD FOR HALLUX VALGUS

Hallux valgus is the forefoot deformity of the great toe. If this occurs, the inflamed protrusion that constantly pushes against the shoe becomes painful.

Thanks to the special design and material, the OK PED felt creates a free area that reduces pressure and friction of the shoe around painful area.

- Relieves toe pain
- Improves immediate mobility and well-being
- Made of hypoallergenic and adhesive pre-cut felt
- Soft protection applied directly to skin
- Easy and fast application
- Reusable
- Available left and right version
- Fits into any walking shoe except dancing or wide court shoes

Stops discomfort caused by a misaligned big toe

Rediscovered foot mobility

Easy to put on

Removes pressure on the affected area and brings about instant relief and dramatically pain decreases.

